

# Produkt des Monats

Jetzt **20%** Rabatt\* sichern!

**SERVA**  
Electrophoresis



Februar


\*Gültig für alle SERVA-Kunden innerhalb der EU. Außerhalb Deutschlands und Österreichs ausschließlich Bestellungen über Online-Shop möglich.  
Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten, Aktionen usw.

## BlueVertical™ PRiME™ Elektrophorese-Einheit für Vertikalminigele



### The Future is PRiME - BlueVertical™ PRiME™

Das System kann neben SERVAGe™ PRiME™ und den anderen SERVAGe™-Typen auch alle anderen kommerziell erhältlichen Fertiggele (Kassettenformat: 10 cm x 10 cm x 0,7 cm) fassen.

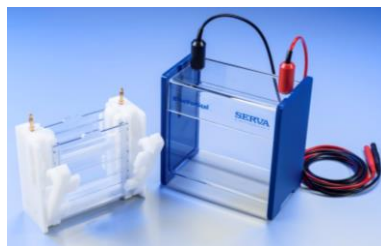


### Eigenschaften:

- Für den gleichzeitigen Lauf von 2 Gelen
- Volumen innere Pufferkammer: 200 ml
- Volumen äußere Pufferkammer: 450 ml
- Abmessungen (BxHxT): 16 cm x 15,6 cm x 9,5 cm
- Gewicht: 1,2 kg
- Optional verfügbar: Glasplatten, Kämmen und Geließstand

### Vorteile:

- Robuster, Pt-beschichteter Elektrodenstab statt Pt-Draht
- Neu entwickeltes System zur schnellen und Leckage-freien Gelbefestigung (siehe unten)

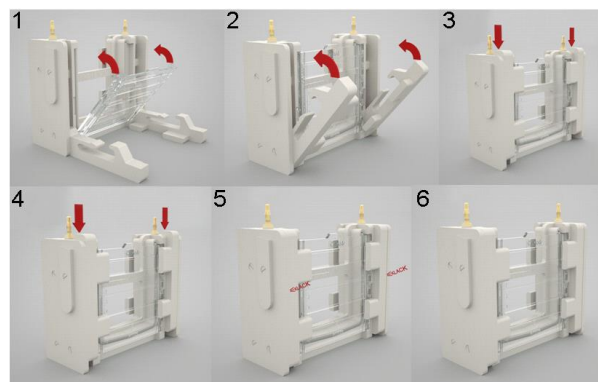

### Anwendungsbeispiele:

- SDS PAGE, z. B. mit SERVAGe™ HSE oder SERVAGe™ TG PRiME™
- Blue/Clear Native PAGE, z. B. mit SERVAGe™ N
- Isoelektrische Fokussierung (IEF), z. B. mit SERVAGe™ IEF

### Bestellinformationen

Elektrophorese-Einheit	Kat.-Nr.	Menge	Preis	Aktionspreis*
BlueVertical™ PRiME™	BV-104	1 Einheit	750,00 €	600,00 €

\* Der Aktionspreis ist gültig bis 28. Februar 2018.

Kontakt für weitere Produktinformationen:

Dr. Judith Koch  
Tel.: +49 6221 13840-44  
E-Mail: Tech.Service@serva.de

SERVA Electrophoresis GmbH  
Carl-Benz-Str. 7  
D-69115 Heidelberg • Germany  
www.serva.de